


Inhaleren: Novolizer volwassenen

Medicijn:

Dosering:

Instructie gegeven door:

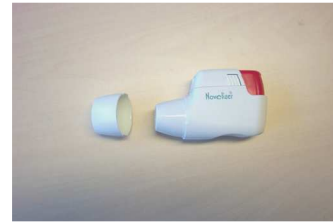

Novolizer, poederinhalator voor volwassenen

Aandachtspunten:

- Houd de novolizer horizontaal en verwijder de beschermdop van het mondstuk
- Druk de gekleurde drukknop **volledig** in: u hoort een dubbele klik, het controlevenster is groen
- Laat de drukknop weer los
- Ga rechtop zitten of staan met het hoofd iets achterover. Zorg dat de mond leeg is
- Adem uit, **nooit door de novolizer** anders wordt deze van binnen vochtig! .
- Plaats het mondstuk tussen de tanden en sluit de lippen eromheen
- Adem gelijkmatig, krachtig, snel en diep in door de mond, tijdens de inademing dient u **binnen de eerste seconde** weer een luide klik te volgen (ook na de klik blijven inademen!)
- Neem de novolizer uit de mond, houdt de adem circa 5 tellen vast zodat het medicijn in de longen kan neerslaan.
- Adem langzaam uit door de neus, mogelijk proeft u een zoete smaak op de tong
- Controleer of de kleur van het controlevenster weer in rood is veranderd
- Na inhalatie **mond en keel** spoelen met water, eerste slokje uitspugen, tweede slokje doorslikken, zonodig wat eten
- Plaats de beschermdop weer op het mondstuk
- Bewaar de Novolizer op een koele en droge plaats (niet in badkamer of keuken)
- Schoonmaken: bij het vervangen van de cartridge
 1. Verwijder de beschermdop. Verwijder het mondstuk (door deze linksom te draaien)
 2. Plaats de Novolizer ondersteboven, pak de doseerschuij vast, trek het naar voren en til het op
 3. Maak het mondstuk, de doseerschuij en de novolizer schoon met een zachte, droge, niet pluizende doek.
 Eventuele poederresten zachtjes eruit kloppen. Gebruik **geen** water of reinigingsmiddel!
- Montage: bevestig de doseerschuij (schuin insteken) en het mondstuk (pinnetje in de groef en naar rechtsdraaien!), de beschermdop terugplaatsen

Klaarmaken voor 1^e gebruik:

1. Plaats novolizer voor u, druk de geribbelde vlakken aan beide zijden van het deksel zachtjes in, schuif het deksel naar voren en til het op
 2. Verwijder de folie van de patroonhouder, plaats patroon in de novolizer met dosisteller naar het mondstuk gericht (de dosisteller geeft het aantal nog beschikbare doses aan in stappen van 20)
 3. Plaats het deksel in omgekeerde volgorde weer terug tot het op z'n plaats klikt
- Novolizer na 1 jaar of maximaal 10 patronen vervangen!
 - Salbutamol, Budesonide en Formoterol, zijn na opening van het patroon, maximaal 6 maanden houdbaar

Checklist gebruik:

	1 ^e instructie	2 ^e instructie	3 ^e instructie
	ja /nee	ja /nee	ja / nee
1. Maak de Novolizer klaar voor gebruik	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
2. Ga rechtop zitten of staan, hoofd iets achterover	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
3. Adem uit (niet door novolizer!)	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
4. Mondstuk tussen de tanden, lippen eromheen	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
5. Adem krachtig, gelijkmatig, diep en snel in (klik!)	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
6. Neem de novolizer uit de mond	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
7. Adem 5 tellen vasthouden	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
8. Adem rustig uit door de neus	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
9. Controleer de kleur van het venster (rood!)	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
10. Mond/keel spoelen of wat eten	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
11. Plaats de beschermdop terug op het mondstuk	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>